

# Sky

Stapelbare Badewannentritt

Stackable bath steps

Marchepied empilable

Escalón apilable para el baño

Badopstapje

**Art. Nr. / REF.: RTL12068**



EU Authorized Representative

Drive Medical LTD  
Ainley's Industrial Estate  
Elland, West Yorkshire,  
United Kingdom HX59JP

Drive Medical GmbH & Co. KG  
Leutkircher Str. 44  
D-88316 Isny/Allgäu

[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)  
[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)  
[www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)


The Drive logo is written vertically in a large, white, sans-serif font. The letter 'i' in 'drive' has a yellow square as its dot.

Die Badewannenstufe von Drive erleichtert das Ein- und Aussteigen in die Badewanne. Die Badewannenstufe von Drive hat eine große, ebene und rutschfeste Trittläche mit einem rutschsicheren Belag. Zwei oder mehr Stufen können aufeinander gestapelt werden, um die Stufe zu erhöhen. Dabei ist folgendermaßen vorzugehen.


## Anleitung

Beim Aufeinanderstellen der Stufen folgende Anweisungen beachten:

1. Die Badewannenstufe auf eine ebene Fläche stellen.
2. Mit einer Münze die 4 weißen Stopfen oben auf der Badewannenstufe herausnehmen. Diese zur späteren Verwendung aufheben.

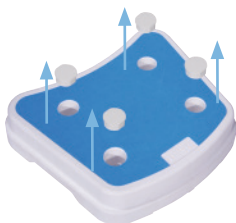

3. Die zweite Badewannenstufe auf die erste setzen: dabei die Stifte auf der Unterseite der Stufe über die Aufnahmeöffnungen bringen. Fest herunterdrücken, um die Stufe zu fixieren.

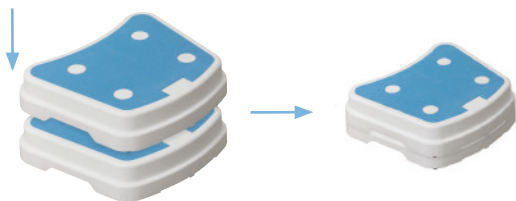

## Zweijährige Produktgarantie

Ihr Produkt der Marke Drive verfügt über zweijährige Garantie auf Material und Herstellung für den Erstverbraucher und -käufer.

Dieses Produkt wurde nach höchsten Anforderungen hergestellt und vor dem Versand genauestens geprüft.

Die zweijährige Produktgarantie ist Ausdruck unseres Vertrauens in Material und Herstellung unserer Produkte und gewährleistet dem Kunden einen langjährigen zuverlässigen Einsatz.

Diese Garantie gilt nicht für Mängel aufgrund falscher oder fahrlässiger Verwendung oder für normalen Verschleiß. Die Garantie gilt nicht für die Teile, wie Gummizubehör, die einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind und regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

Wenn sie Fragen zu Ihrem Geräte der Marke Drive oder zu dieser Garantie haben, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler.

Stand: 02.2015

Irrtum und Änderungen vorbehalten.



© 2006 Medical Depot, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.


Port Washington N.Y. 11050 USA Hergestellt in China

The Drive Bath Step is designed to make getting in and out of the bath or tub easier. The Drive Bath Step features a large flat slip proof stepping surface with builtin non-slip pads. Two or more steps can be combined to raise the height of the steps by following the instructions below.


## Instructions

To combine bath steps, follow the instructions below.

1. Place bath step on flat surface.
2. Using a coin, remove each of the 4 white circles located on the top of the bath step. Store these for future use.

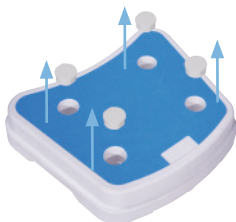

3. Place second bath step on top of first, lining up prongs on underside of step with receptacle holes. Press down firmly to secure in place.

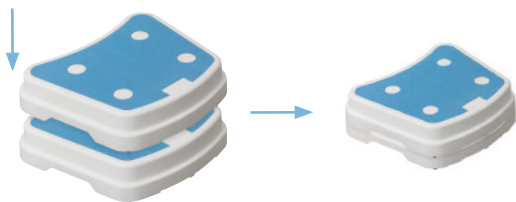

## Two year Limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for two year of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This two year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to components, such as rubber accessories, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

As per: 02.2015  
Subject to error and change



© 2006 Medical Depot, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.


Port Washington N.Y. 11050 USA Hergestellt in China

Le marchepied pour la baignoire Drive est conçu pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire. Le marchepied pour la baignoire Drive possède une grande surface plane antidérapante et des pieds intégrés tout aussi sécuritaires. Vous pouvez empiler deux marchepieds ou plus pour augmenter la hauteur totale, en suivant ces instructions.


## Instructions

Suivez ces instructions pour empiler les marchepieds.

1. Placez le marchepied sur une surface plane.
2. À l'aide d'une pièce de monnaie, retirez les quatre capuchons blancs situés sur le dessus du marchepied. Conservez-les pour un usage futur.

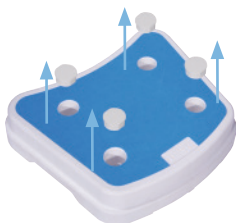

3. Die zweite Badewannenstufe auf die erste setzen: dabei die Stifte auf der Unterseite der Stufe über die Aufnahmeöffnungen bringen. Fest herunterdrücken, um die Stufe zu fixieren.

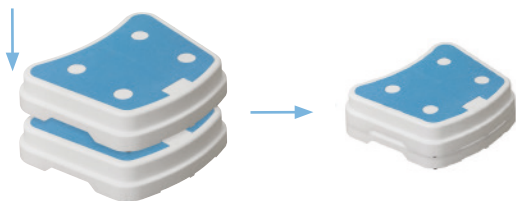

## Garantie limitée de deux ans

Votre produit de marque Drive est garanti exempt de tout défaut et vice de fabrication pour une durée de deux ans à partir de la date d'achat.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son emballage. Cette garantie limitée de deux ans reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de notre produit. Pour nos clients elle est l'assurance d'un service fiable pour de nombreuses années.

Cette garantie ne s'applique pas à des problèmes causés par une mauvaise utilisation de le produit ou la négligence, et dans les limites d'une usure normale du produit. Elle ne s'étend pas également aux éléments à durée de vie limitée tels que les accessoires en caoutchouc, qui sont sujets à une utilisation fréquente et ont besoin d'être remplacés périodiquement.

Pour toute autre question relative à votre appareil Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur agréé de notre compagnie.

Stand: 02.2015

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.



© 2006 Medical Depot, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.


Port Washington N.Y. 11050 USA Hergestellt in China

El escalón de baño Drive está diseñado para entrar y salir de la bañera o tina con más facilidad. El escalón de baño Drive cuenta con una superficie para pisar grande y plana que cuenta con almohadillas antideslizantes integradas. Se pueden combinar dos o más escalones para elevar la altura de los escalones siguiendo las instrucciones a continuación.


## Instrucciones

Para combinar los escalones de baño, siga las siguientes instrucciones.

1. Coloque el escalón sobre una superficie plana.
2. Con una moneda, quite cada uno de los cuatro círculos de color blanco situados en la parte superior del escalón. Guárdelos para usarlos en el futuro.

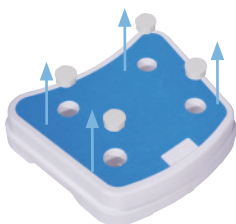

3. Coloque el segundo escalón sobre el primer escalón, alineando las puntas en la parte inferior del escalón con los agujeros del receptáculo. Presione con firmeza hacia abajo para asegurarlo en su lugar.

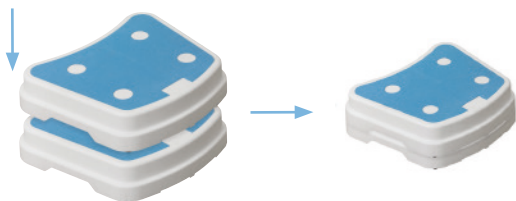



## Garantía limitada por 2 años

Su producto marca Drive está garantizado de no tener defectos en los materiales y la fabricación por dos años desde la compra por el consumidor original.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Estos dos años de Garantía Limitada son una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del producto debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario, o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes, tales como los accesorios de goma, que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

02.2015

Sujeto a errores y modificaciones.



© 2006 Medical Depot, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.


Port Washington N.Y. 11050 USA Hergestellt in China

De badkuiptrap van Drive maakt het in- en uitstappen in de badkuip gemakkelijker. De badkuiptrap van Drive heeft een groot, vlak en slipvast treedvlak met een slipbestendige bedekking. Er kunnen twee of meer treden op elkaar gestapeld worden om de trap te verhogen. Daarbij gaat u als volgt te werk.


## Handleiding

Volg bij het op elkaar zetten van treden de volgende aanwijzingen:

1. Zet de badkuiptrap op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder met een munt de 4 witte stoppen bovenaan op de badkuiptrap. Bewaar ze voor later gebruik.

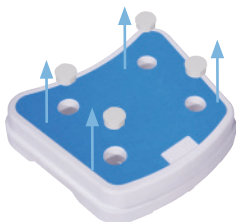

3. Zet de tweede badkuiptrede op de eerste en breng daarbij de stiften op de onderkant van de trede over de openingen. Druk stevig aan om de trede vast te zetten. Ihr Produkt der Marke Drive verfügt über zweijährige Garantie auf Material und Herstellung für den Erstverbraucher und -käufer.

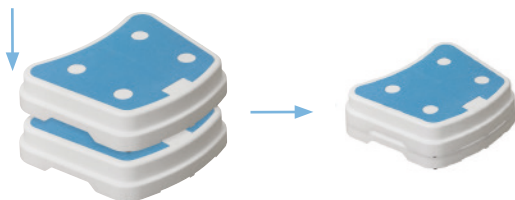

## Tweejarige productgarantie

Uw product van het merk Drive beschikt over een tweejarige garantie op het materiaal en de productie voor de eerste gebruiker en koper.

Dit product is vervaardigd volgens de strengste vereisten en is voor verzending uiterst grondig gecontroleerd.

De tweejarige garantie geeft blijk van ons vertrouwen in het materiaal en de productie van onze producten en verzekert de klant van langdurig en betrouwbaar gebruiksgenot.

Deze garantie geldt niet voor defecten tengevolge van het foutief of nalatig gebruik of normale sleet. De garantie geldt niet voor de onderdelen, zoals het rubberen toebehoren, die onderworpen zijn aan normale sleet en regelmatig vervangen moeten worden.

Wend u bij vragen over uw toestel van het merk Drive of deze garantie a.u.b. tot uw wederverkoper.

Stand: 02.2015

Onder voorbehoud van wijzigen.



© 2006 Medical Depot, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Hergesteld in China

**drive**

[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)  
[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)  
[www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)